

Способ применения:

Разорвать защитную оболочку. Вытащить презерватив, не касаясь краев оболочки. Следите, чтобы не проколоть презерватив ногтями или браслетом. Наденьте презерватив на пенис в состоянии эрекции до того, как пенис проникнет в вагину. Для обеспечения большей чувствительности, зажмите резервуар для сбора спермы пальцами т.о., чтобы из него вышел воздух. После завершения полового акта, снимайте презерватив, когда пенис находится в состоянии эрекции. Держитесь за юблю презерватива, пока он не снят полностью. Это препятствует соскальзыванию презерватива и пропливанию спермы.

Не используйте для смазки вазелин, минеральные смазки и другие вещества на нефтяной основе. Это может привести к разрыву презерватива.

Если требуется дополнительная смазка, то можете использовать контрацептивный вагинальный гель.

Условия хранения:

Храните презервативы в местах, защищенных от воздействия ультрафиолетового излучения (солнечный свет или лампы дневного света), вдали от источников тепла.

Каждый презерватив протестирован на надежность электроникой.

Предотвращение болезней, передающихся половым путем.

При правильном применении, презерватив является не только эффективным средством предотвращения беременности, но и эффективным средством предотвращения болезней, передающихся половым путем. Для обеспечения лучшей защиты от болезней, передающихся половым путем, следуйте данным инструкциям по эксплуатации.

Эти презервативы изготовлены из натурального каучука, латекса.

Внимание: Натуральный каучук латекс может вызывать аллергическую реакцию.

Засіб вживання:

Розірвіть оболонку кондома, витягнути кондом, не торкаючись краю оболонки. Зберігайте кондом від проколів ногтями чи браслетом. Натягніть кондом на пенис у стані ерекції до того як пенис увійде до вагіни. Для кращої сприйнятливості, доки розглажуючи кондом, зажміть кінчик кондома так, щоб повітря вийшло з резервуару. Знімайте кондом, доки пенис знаходитьться у стані ерекції. Деркіть за кільце кондому, доки його не знятто повністю. Це запобігає зісковзуванню кондома та виліванню сперми. Не вживайте вазелін, мінеральних мастил та інших речовин на основі бензину. Це може привести до розриву кондому.

Якщо необхідне додаткове мастиння, вживайте контрацептивний вагінальний гель

Зберігання:

Зберігайте кондоми у місцях подалі від джерел ультра-фіолетового випромінення (сонячне світло або флуоресцентні лампи) та джерел тепла.

Кожний кондом індивідуально тестиють електронікою на надійність

Запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом.

Якщо кондоми вживати правильно, то вони не тільки є ефективним засобом запобігання вагітності, але також ефективним засобом запобігання поширення хвороб, що передаються статевим шляхом. Для кращого захисту проти хвороб, що передаються статевим шляхом, додержуйтеся інструкцій по використанню.

Ці презервативи робляться з природного гумового латексу. Запобігання: Природний гумовий латекс, можливо, викликає алергічні відгуки.

KONDOMI I VIRUS SIDE

- Upotrebovanje ROMED kondoma, rizik od trudnoće i/ili od seksualno prenosivih bolesti se znacajno smanjuje. Ipak, nijedan kondom ne može da garantuje 100% sigurnosti.

Ovih kondom biti napravljen nad prirođen guma lateks. Oprez prirođen guma lateks smještj uzrok alergičkog otpora.

KONDOMI DAJU POUZDANU ZAŠTITU OD TRUDNOĆE I SEKSUALNO PRENOSIVIH BOLESTI.

« Nezgode » su, obično, rezultat nepravilne upotrebe. Zbog toga bi trebalo da predvodno pročitate sledeće uputstvo za upotrebu.

UPUTSTVO

- Kondom izvadić iz omota samo neposredno pre upotrebe.
- Pocepati omot na mestu zareza. Ne koristiti oštре predmete.
- Voditi računa o oštrem noktima prilikom stavljanja kondoma.
- Staviti kondom kada je penis potpuno ukriven. Povlačenje kožice unazad olakšava stavljanje kondoma.
- Prilikom stavljanja kondoma prstima stisnuti i zatvoriti rezervoar za spermu. Ovo spraćava zarobljavanje vazduha u rezervoaru. Ako vazduh dospe u rezervoar za spermu, mi preporećujemo da upotrebite drugi kondom.
- Postavite kondom na vrh penisa i odmotajte ga što je više moguće.
- Posle odnosa, pridržite donji kraj kondoma tako da ne može da sklizne sa penisa prilikom izvlačenja.

VAŽNO

- Nikada kondom ne koristiti drugi put!
- Ako je potrebno dodatno podmazivanje, koristite samo lubrikant na bazi vode. Lubrikanti na bazi ulja (vazelina, biljno ulje itd.) mogu da značajno oslabi kondom.
- Kondom bacite u kantu za otpatke, a ne u toalet, jer to može dovesti do ozbiljnog zapušenja odvodne cevi.
- Ne koristite kondom posle isteka « roka trajanja ».
- Konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom o kompatibilnosti kondoma sa preparativima koje se u slobodnoj prodaji mogu nabaviti, a koji se aplikuju na penis ili vaginu.

KONDOMI I VIRUS SIDE

- Upotrebovanje ROMED riscul gravitităii și/sau al bolilor transmisi sexual este redus în mod considerabil. Cu toate acestea, nici un prezentativ nu poate oferi o securitate de 100%.

PRESERVATIVE SI VIRUSUL HIV

- Cu prezentativele ROMED riscul gravitităii și/sau al bolilor transmisi sexual este redus în mod considerabil. Cu toate acestea, nici un prezentativ nu poate oferi o securitate de 100%.

Acesta prezentativ sunt fabricate din latex cu cauciuc natural.
Atentie: latexul poate provoca reacții alergice.

Un prezentativ oferă o protecție sigură contra gravității și a bolilor cu transmitere sexuală. "Accidente" sunt, de obicei, rezultatul utilizării incorecte. Din acest motiv dumneavoastră trebuie să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.**INSTRUCȚIUNI****• Scoateți prezentativul din folia de ambalaj numai imediat înainte de utilizare.****• Rupeti folia de ambalaj la partea creștată. Nu utilizați obiecte ascuțite!****• Prăznați prezentativul ușor pe următoarea ușoară.****• Puneti prezentativul când penisul este în erecție completă. Pentru a ușura punerea prezentativului, retrageți preputul.****• În timpul punerii prezentativului, prindeți cu degetele rezervorul pentru spermă pentru a-l aplăti.****• Aceasta previne pătrunderea aerului în rezervor. Dacă aerul a pătruns în rezervorul pentru spermă, vă sfătuim să utilizați un nou prezentativ.****• Puneti prezentativul pe vârful penisului și derulați prezentativul cât mai mult posibil.****• După acțu sexual întrebați de capătul de jos al prezentativului astfel că el să nu poată aluneca de pe penis în timp ce acesta este retras.****WAŻNE****• Nigdy nie używaj tej samej prezentatywy ponownie.****• Używając dodatkowych środków nawilżających, stosuj tylko produkty na bazie wody. Lubrykanci na bazie olejów (wazelina, olej roślinny, itp.) mogą uszkodzić prezentatywy.****• Zużytą prezentatywę wyrzucaj do śmieci, nigdy do toalety.****• Nie używaj prezentatywy po upłynięciu terminu ważności.****• Nie używaj prezentatywy po upłynięciu terminu ważności.****• Niektóre lekarstwa stosowane miejscowo na członek lub pochwę mogą uszkodzić prezentatywy. W takich przypadkach przed użyciem prezentatywy poradź się lekarzem lub farmaceutem.****• Nie używaj prezentatywy dupa "data de expirare".****• Consultați medicul sau farmacistul Dvs. cu privire la compatibilitatea cu prezentatywe a prescriptiilor de medicamente topicale vandute direct, care sunt aplicate pe penis sau în vagin.****Prezentatywy a wirus HIV**

- Używanie prezentatywy Romed zmniejsza ryzyko wystąpienia ciąży, zarażenia wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jednak jedna metoda antykoncepcyjna nie daje 100% ochrony.

PREZERVATIVE SI VIRUSUL HIV

- Cu prezentativele ROMED riscul gravitităii și/sau al bolilor transmisi sexual este redus în mod considerabil. Cu toate acestea, nici un prezentativ nu poate oferi o securitate de 100%.

Acete prezentative sunt fabricate din latex cu cauciuc natural.**Atentie: latexul poate provoca reacții alergice.****Właściwe stosowanie prezerwatyw zmniejsza ryzyko wystąpienia ciąży oraz chorób przenoszonych drogą płciową. "Accidente" wynikają z nieuwierzytelnych błędów, ale przede wszystkim z nieuwierzytelnych błędów, z których najważniejszym jest nieuwierzytelny fakt, że niektórzy ludzie nie uwierzą w to, co mówią producenci prezerwatyw. "Accidente" wynikają z nieuwierzytelnych błędów, ale przede wszystkim z nieuwierzytelnych błędów, z których najważniejszym jest nieuwierzytelny fakt, że niektórzy ludzie nie uwierzą w to, co mówią producenci prezerwatyw.****Instrukcja użytkowania****• Wyjmij prezerwatyw z opakowania tuż przed użyciem.****• Odejmij brzeg opakowania w miejscu nacięcia, nie używając ostrzych narzędzi.****• Przy zakładaniu prezerwatywu uważaj na ostre paznokcie, które mogą uszkodzić prezerwatywę.****• Przy zakładaniu prezerwatywu zakładaj go na intymny kontakt.****• Przy zakładaniu prezerwatywu, skończ ją na koniec dwoma palcami, gdy powietrze zgromadzone w prezerwatywie może spowodować jej pęknięcie.****• Nałożyć prezerwatywę zwiniałą rolką na zewnętrzną na koniec członka i rozwinią na całą jego długość cały czas sklejkając jej koniec.****• Po wytrusku wyciągnij członek, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jej nasadzie. Znów prezerwatywę.****Ważne****• Nigdy nie używaj tej samej prezentatywy ponownie.****• Używając dodatkowych środków nawilżających, stosuj tylko produkty na bazie wody. Lubrykanci na bazie olejów (wazelina, olej roślinny, itp.) mogą uszkodzić prezentatywy.****• Zużytą prezentatywę wyrzucaj do śmieci, nigdy do toalety.****• Nie używaj prezentatywy po upłynięciu terminu ważności.****• Niektóre lekarstwa stosowane miejscowo na członek lub pochwę mogą uszkodzić prezentatywy. W takich przypadkach przed użyciem prezentatywy poradź się lekarzem lub farmaceutem.****• Nie używaj prezentatywy dupa "data de expirare".****• Consultați medicul sau farmacistul Dvs. cu privire la compatibilitatea cu prezentatywe a prescriptiilor de medicamente topicale vandute direct, care sunt aplicate pe penis sau în vagin.****Prezentatywy a wirus HIV**

- Używanie prezentatywy Romed zmniejsza ryzyko wystąpienia ciąży, zarażenia wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jednak jedna metoda antykoncepcyjna nie daje 100% ochrony.

Te prezentatywy są wykonane z naturalnej gumy lateksowej.

Uwaga: Naturalne gumy lateksowe mogą powodować reakcję alergiczną.


Az óvszer rendszeres használata megbízható védelmet nyújt a nemkívánt terhesség, valamint a szexuálisan úton terjedő betegségek szempontjából. Az esetleges előfordulás "balesetek" minden esetben az óvszer helytelen használatának következménye. Azért, hogy Önnek ez ne fordulhasson elő, az óvszer használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!**Hogyan használjuk?****• Csatk közvetlenül a használattól előtt vegye ki az óvszert a fóliából.****• Tépje fel a fóliát a jelenlő. Ne használjon éles tárgyat a fólia kibontásához!****• Figyeljen arra, hogy felhelyezéskor körömmel se sértse meg az óvszert.****• Az óvszert akkor kell felhelyezni a péniszre, amikor az teljes erektionet mutat. A fityma hátrahúzás meggönykönti az óvszert a felhelyezést!****• Az óvszert alkalmazva a péniszre, amikor a szpermatoritáltyába. Ez elkerülhető, ha az óvszer spermatoritáltyát felhelyezés közben összesorítja az újrahasználával így megakadályozza a levegő beszorulását a spermatoritáltyába. Ha megis levegő kerülne a spermatoritáltyába, az óvszer alkalmazása nem biztosításos ezért egy új óvszert használjan.****• Felhelyezze az óvszert a pénisz végére és simítás a tővég,****amennyire csak lehet.****Szerekkel után a pénisz tövénél fogja le az óvszer végét, megelőzve az óvszer lecsúszását kiuhásban.****FONTOS****• Az óvszer egyszer használatos! Soha ne használja kétszel!****• Ha további sikúsárasa van szükség, csak víz-alapú síkosítót használjon. Az olaj-alapú síkosítók (vazelin, növényi olaj, stb) roncsolják az óvszert anyagát, ezzel veszélyeztetik az óvszer hatékonyságát!****• Használj után az óvszert dobja a szemetgyűjtőbe.****Soha ne dobjon használt óvszert a WC-be, mert ez a szennyvízszállításra dugulásnak okozhatja.****• Soha ne használjon lejáratú szavatosságú óvszert!****• A megfelelő síkosító, pénisz illetve hüvelykrém kiválasztása érdekében kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét!****Az óvszer és a HIV vírus:**

- A ROMED óvszer használatával a nemkívánt terhesség és a szexuálisan úton terjedő betegségek veszélye nagyon mértékben csökkenhető!

- Azonban, nincs olyan óvszer amely 100%-os védelmet biztosít!

Ezek a kondomok valódi gumi latexból készülnek. Övátosság: A valódi gumi latex allergiás reakciókat okozhat.

LUBRICATED CONDOMS WITH RESERVOIR
EN ISO 4074

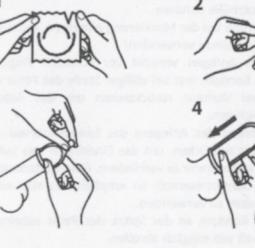

Contains natural rubber latex
Do not re-use
Do not use if package is damaged

Store between 4°C and 30°C
Keep away from sunlight
Keep dry

Caution: read instructions before use

Ein Kondom ist ein zuverlässiger Schutz gegen Schwangerschaften sowie sexuell übertragene Erkrankungen. "Unglücksfälle" sind meist eine Folge falschen Gebrauchs. Lesen Sie deshalb erst die Gebrauchsanweisung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Kondom erst kurz vor dem Gebrauch aus Schutzhülle nehmen.
- Die Folie bei der Markierung einreiben, keine scharfen Gegenstände verwenden!
- Beim Anlegen vorsicht vor scharfen Fingernägeln.
- Das Kondom erst bei völliger Steife des Penis anlegen. Dabei Vorhaut zurückziehen um das Anlegen zu erleichtern.
- Während des Anlegens das Samenreservoir mit den Finger zudrücken, um das Eindringen von Luft in das Samenreservoir zu verhindern. Gelangt dennoch Luft in das Samenreservoir, so empfiehlt es sich ein neues Kondom zu verwenden.
- Das Kondom an der Spitze des Penis anbringen und soweit wie möglich abrollen.
- Nach der Ejakulation das Kondom am Rand festhalten, sodass es beim Herausziehen nicht vom Penis abrutscht.

WICHTIG

- Ein Kondom immer nur einmal verwenden!
- Werden weitere Gleimittel gewünscht, dann nur Gleimittel auf Wasserbasis. Gleimittel auf Ölbasis sowie andere ölige Substanzen (Vaseline, Salatöl, usw.) können die Dicke des Kondoms in gefährlicher Weise beeinträchtigen.
- Kondome niemals in die Toilette werfen, da sie Verstopfungen verursachen können. Sie gehören in den Abfalleimer.
- Kondome nach dem Verstreichen des "Expiry" Datums nicht mehr verwenden.
- Befragen Sie einen Doktor oder Apotheker über die Verträglichkeit von verordneten Kondomen oder nicht rezeptpflichtiger Medizin, die auf Penis oder Vagina lokal aufgetragen wird.

KONDOME UND HIV VIRUS

- Die Verwendung von ROMED Kondomen verringert das Risiko unerwünschter Schwangerschaften und/oder sexuell übertragbarer Erkrankungen erheblich. Kein Kondom kann jedoch 100% Sicherheit bieten.

Diese Kondome sind aus Naturkautschuk Latex. Achtung: Naturkautschuk Latex kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Un preservativo e un mezzo di protezione affidabile contro la gravidanza ed affezioni sessualmente trasferibili. In generale, eventuali piccoli "incidenti" sono occorsi in general per uso improprio. Per tale ragione, leggere prima le seguenti istruzioni d'uso.

ISTRUZIONI D'USO

- Togliere il preservativo poco prima dell'uso dalla confezione.
- Aprire la confezione dalla parte dell'intaccatura. Non utilizzare dei mezzi appuntiti!
- Far attenzioni a unghie taglienti quando si mette il preservativo.
- Mettere il preservativo solo quando il pene è completamente eretto. Per facilitare l'applicazione del preservativo, spostare il prepuzio del pene all'indietro.
- Durante l'applicazione del preservativo, stringere il vaso seminale per evitare che penetri dell'aria nel vaso seminale. Quando il vaso seminale contiene dell'aria, se consiglia di utilizzare un nuovo preservativo.
- Sistemare il preservativo sulla punta di pene e srotolarlo il più possibile.
- Dopo l'ejaculazione dello sperma, tener fermo il preservativo all'orlo per evitare che possa scivolare dal pene.

IMPORTANTE

- Non utilizzare il condón más que una vez!
- Si prefiere más lubricante, escoja sólo un lubricante a base de agua. Un lubricante a base de aceite y otras sustancias tipo aceite (p.e. vaselina, aceite para ensalada) pueden disminuir la resistencia del condón severamente.
- Nunca eche el condón en banó sino en el cubo de basura: así se evita obstrucciones en el acantarillado.
- No buttare mai un preservativo mai nel gabinetto ma nella pattumiera per non rischiare l'otturazione della fogna.
- Non utilizzare il preservativo dopo la data "Expiry".

PRESERVATIVI ED IL VIRUS HIV

- Con il preservativo ROMED viene ridotto notevolmente il rischio di gravidanza e/o di affezioni sessualmente trasferibili. Però la sicurezza la 100% non si può pretendere da nessun preservativo.

Questi preservativi sono fatti di lattice di gomma naturale. Attenzione: il lattice di gomma naturale può causare reazioni allergiche.

El condón es un anticonceptivo seguro y protege contra enfermedades de transmisión sexual. Las "desgracias" ocurren en general por uso impropio. Por eso lea primero el siguiente modo de empleo.

MODO DE EMPLEO

- Saque el condón poco antes de uso del folio plástico.
- Desgarre el folio en la muesca. No use objetos afilados!
- Cuidado con unas picudas al ponerselo.
- Ajuste el condón cuando el pene esté completamente teso. Se puede facilitar el ajuste. Corriendo el prepucio del pene hacia abajo.
- Mantenga durante el ajuste del condón el recipiente de semen apretado con los dedos. Así se evita que el recipiente de semen se llene con aire. En caso de que se haya aire en el recipiente de semen le consejamos de usar un condón nuevo.
- Coloque el condón sobre la punta del pene y desenrolle el condón hacia abajo.
- Despues de hacer el amor sujeté el condón al extremo para que éste no se escurra del pene al retroceder.

IMPORTANTE

- Nunca utilice el condón más que una vez!
- Si prefiere más lubricante, escoja sólo un lubricante a base de agua. Un lubricante a base de aceite y otras sustancias tipo aceite (p.e. vaselina, aceite para ensalada) pueden disminuir la resistencia del condón severamente.
- Nunca eche el condón en banó sino en el cubo de basura: así se evita obstrucciones en el acantarillado.
- No utilizar el condón cuando se ha expirado la indicada "Expiry".

CONDONES Y EL VIRUS HIV

- Con los condones ROMED se disminuye considerablemente el riesgo de un embarazo y/o una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo ningún condón puede garantizar una seguridad de 100%.

Estos condones están hechos de látex de caucho natural. Precaución: La goma de látex natural puede causar reacciones alérgicas.

These condoms are made of natural rubber latex. Caution: Natural rubber latex may cause allergic reactions.

A condom offers reliable protection against pregnancy and sexually transmitted diseases. "Accidents" are usually the result of incorrect use. You should therefore read the instructions for use beforehand.

INSTRUCTIONS

- Only remove the condom from the foil envelope immediately before use.
- Tear the foil at the notch. Do not use sharp objects!
- Watch out for sharp fingernails when putting on the condom.
- Put on the condom when the penis is completely erected. Pulling back the foreskin makes it easier to put the condom on.
- While putting on the condom, pinch the sperm reservoir closed with your fingers. This prevents air getting trapped in the reservoir. If air should get into the sperm reservoir, we advise you to use a new condom.
- Place the condom on the end of the penis and roll down the condom as far as possible.
- After sex, hold down the bottom end of the condom so that it cannot slide off the penis while pulling out.

IMPORTANT

- Never use a condom a second time!
- If extra lubrication is needed, use only water-based lubricants. Oil-based lubricants (vaseline, vegetable oil, etc.) can weaken the condom considerably.
- Dispose of condoms in the bin, never in the toilet, as this can lead to sewage-pipe blockages.
- Do not use the condom after the "expiry date".
- Consult a doctor or pharmacist about the compatibility with condoms of prescription of over-the-counter topical medicines that are applied to the penis or the vagina.

CONDOMS AND THE HIV VIRUS

- With ROMED condoms the risk of pregnancy and/or sexually transmitted diseases is reduced considerably. However, no condom can offer 100% security.

PRESERVATIFS ET LE SIDA

- L'utilisation de préservatifs ROMED réduit indéniablement le risque de grossesse et/ou de contamination avec des M.S.T.(Maladies Sexuellement Transmissibles), dont le SIDA. Toutefois, aucun préservatif ne saurait offrir une sûreté absolue.

Ces condoms sont faits de latex de caoutchouc naturel. Attention: latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques.

Un préservatif est un moyen contraceptif et de protection contre les M.S.T., de grande fiabilité. En général, les "accidents" sont dus à une mauvaise utilisation. Pour cette raison, lire préalablement les conseils d'utilisation ci-dessous.

MODE D' UTILISATION

- Sortir le préservatif de l'emballage juste avant l'utilisation.
- Déchirez le film d'emballage au niveau de l'encoche. Ne jamais utiliser des objets coupants!
- Puiser dans le film d'emballage lorsque le pénis est en érection. Pour faciliter la pose, retrousser le prépuce.
- Tandis que vous posez le préservatif, maintenez la poche du réservoir aplatie entre les doigts, afin de prévenir l'entrée d'air dans celle-ci. Si le réservoir fait une poche d'air, nous vous recommandons d'utiliser un nouveau préservatif.
- Placez le préservatif sur le gland et le dérouler le plus possible sur la verge.
- Après l'acte, maintenir le préservatif par le bord, de telle manière qu'il ne puisse glisser de la verge lorsque l'homme se retire.

IMPORTANTE

- Ne jamais réutiliser un préservatif!
- Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant supplémentaire, choisissez toujours un lubrifiant-base d'eau. Les lubrifiants à base de l'huile et autres substances huileuse (vaseline, huile de cuisine, etc.) peuvent altérer sérieusement la résistance d'un préservatif.
- Toujours jetez les préservatifs dans une poubelle, jamais dans les toilettes, ils risquent de boucher le système d'évacuation.
- Ne jamais utiliser un préservatif dont la date "expiry" est écoulée.
- Consultez un docteur ou un pharmacien au sujet de la compatibilité avec les préservatifs d'ordonnance ou par les médicaments d'actualité au comptoir qui sont appliqués au pénis ou au vagin.

CONDOOMS EN HET HIV VIRUS

- Met ROMED condooms wordt het risico van een zwangerschap en/of seksueel overdraagbare aandoeningen aanzienlijk verkleind. 100% zekerheid kan echter van geen enkel condoom verwacht worden.

Deze condooms zijn gemaakt van natuurlijk rubber latex. Waarschuwing: Natuurlijk rubber latex kan een allergische reactie veroorzaken.

Een condoom is een betrouwbare bescherming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. "Ongelukjes" ontstaan over het algemeen door onjuist gebruik. Lees daarom eerst onderstaande gebruiksaanwijzing.

GEbruiksaanwijzing

- Neem het condoom pas vlak voor gebruik uit de folieverpakking.
- Raspge de embalagem no local indicado. Não use objectos afiados.
- Atenção ás unhas afiadas a quando da colocação do preservativo.
- Coleque o preservativo quando o pénis está completamente ereto. Puxar para trás o prepucio.
- Enquanto coloca o preservativo, pressione o reservatório de esperma fechado com os dedos. Isto impede que ar se acumule no reservatório. Se entrar ar e uma novacondoom op de top van de penis en rol het condoom zo ver mogelijk af.
- Na het vrijen het condoom bij de rand vasthouden, zodat hij tijdens het terugtrekken niet van de penis kan afgliden.

BELANGRIJK

- Gebruik een condoom nooit opnieuw!
- Als extra glijmiddel gewenst is, kies dan uitsluitend een glijmiddel op waterbasis. Een glijmiddel op oliebasis en andere olieachtige substanties (vaseline, olie vegetal, etc.) kunnen de sterkte van een condoom ernstig verminderen.
- Dele os preservativos no caixote, nunca na sanita, pois deite os preservativos no caixote, nunca na sanita, pois
- Nâo use o preservativo após a sua "data de expiração".
- Consulte um médico ou farmacêutico quanto à compatibilidade com preservativos de receitas de medicamentos que são aplicados no pénis ou na vagina.

PRESERVATIVOS E O VÍRUS HIV

- Com preservativos ROMED o risco de gravidez e/ou doenças sexualmente transmitidas é reduzido consideravelmente. Contudo, nenhum preservativo oferece uma garantia de 100%.

Látex de borracha natural, não espermicina. Atenção, este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas.

Um preservativo oferece proteção de confiança contra a gravidez e doenças sexualmente transmitidas. "Acidentes" são geralmente o resultado de uso incorreto. Deve portanto ler as instruções antes de usar.

INSTRUÇÕES

- Retire o preservativo da embalagem somente antes de o usar.
- Rasgue a embalagem no local indicado. Não use objectos afiados.
- Atenção ás unhas afiadas a quando da colocação do preservativo.
- Coleque o preservativo quando o pénis está completamente ereto. Puxar para trás o prepucio.
- Enquanto coloca o preservativo, pressione o reservatório de esperma fechado com os dedos. Isto impede que ar se acumule no reservatório. Se entrar ar e uma novacondoom op de top van de penis en rol het condoom zo ver mogelijk af.
- Na het vrijen het condoom bij de rand vasthouden, zodat hij tijdens het terugtrekken niet van de penis kan afgliden.

IMPORTANTE

- Nunca use um preservativo uma segunda vez!
- Se for necessário lubrificação extra, use apenas lubrificantes á base de água.
- Als extra glijmiddel gewenst is, kies dan uitsluitend een glijmiddel op waterbasis. Lubrificantes á base de óleo (vaselina, óleo vegetal, etc.) podem enfraquecer consideravelmente o preservativo.
- Dele os preservativos no caixote, nunca na sanita, pois
- Nâo use o preservativo após a sua "data de expiração".
- Consulte um médico ou farmacêutico quanto à compatibilidade com preservativos de receitas de medicamentos que são aplicados no pénis ou na vagina.

PRESERVATIVOS E O VÍRUS HIV

- Com preservativos ROMED o risco de gravidez e/ou doenças sexualmente transmitidas é reduzido consideravelmente. Contudo, nenhum preservativo oferece uma garantia de 100%.

Látex de borracha natural, não espermicina. Atenção, este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas.