


Aufreißen | Разкъсване | Vorspiel | Под-
Otevření | Otváranje | част | Navléka-
Otwarcie opakowania | Przygotowa-
Deschidere | Otvorenie | Preludiu | Nav-



Vorspiel Подготовителна	Nachspiel Заключителна
часть Navléknuti Predigra	часть Po styku Nakon
Przygotowanie do użycia	spólnog odnosa
Preludiu Navliekanie	Po użyciu Dupä Po użyciu

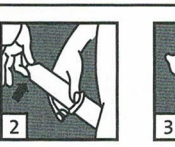

spiel | Заключителна |
Po styku | Nakon
log odnosa |
tyciu | Dupā | Po užyciu



MAPIA GmbH - Industriestraße



CE O



197

de WICHTIGE HINWEISE Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln. Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden!

Kondome kühlen, trocknen und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Dennoch ist bei der Anwendung Vorsicht geboten. Die Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auftreten, falls der Benutzer allergisch auf Latex reagiert. Bei Beschwerden oder Reaktionen sollte man sofort einen Arzt konsultieren und fragen. Sie bitten ihren Arzt um Rat. Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Bei richtiger Anwendung (siehe Anwendungshinweise) schützen R3-Kondome das Schwangerschafts- und Überlebensrisiko bei Kondomgebrauch. Verhütungsmittel können Kränkungen zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. **Falls das Kondom wäschen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Kondom dem Hersteller oder der zuständigen nationalen Behörde. Gebrauche Sie nicht, wenn Sie hören in den Abfaller, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit**

ANWENDUNGSHINWEISE

1 Die Siegelfolie vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle („open here“) öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. **Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits geöffneten Siegelbriefchen verwenden!**

2 Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpfeiler entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den Penis, bis es bis zum letzten Rest der Ejaculation zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen ist die Abrollrichtung falsch. **In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Infektionen und Schwangerschaften entstehen werden.** Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutcht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, die dies zu einem Riss führen kann.

3 Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern.

VORSICHT! Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z.B. Vaseline, Öl, Butter, Cremes) verwenden, da diese das Kondom anreißen und lassen es schnell zerreißen. **Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet gekennzeichnet sein.** Bei der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenwand des Vaginas auftragen, da dies das Risiko, dass das Kondom abbrucht oder reißt, bei anisthetischer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um das Risiko einer Beschädigung des Kondoms zu verringern. Bei Verwendung von Schweißchenpills bitte die jeweilige Gebrauchshinweise lesen. Bei der Anwendung von Kondom, Penis und Vagina rezeptpflichtig oder rezeptfrei, Medikamente (Salben, Gele etc.) angewendet, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach der richtigen Anwendung. Bei der Anwendung von Kondom, Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. **Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.** Die mehrmalige Verwendung von Kondomen ist nicht geeignet, kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. **Für jeden Wechsel**

neues Kondom verwenden

Важни указания: С презервативите трябва да се внимава при употребата им. Моля, обърнете внимание на срока на годност, отбелязан върху опаковката и запечатването – не използвайте презерватива след изтичане на срока на годност. Използвайте презервативите на хладно и сухо място, далеч от топлина и пряка слънчева светлина. Презервативите не колпавят в организма и не произвеждат топлина, която може да повлияе на спермата. Могат да възникнат непереносимости под формата на алергични реакции, включително до анафилактичен шок. Ако почувствате дискомфорт или дразнене, спрете да използвате презерватива и потърсете Вашия лекар за съвет. Всички презервативи трябва да се използват правилно и внимателно. При правилна употреба (всички указания за употреба) презервативите R3 предпазват от бременност и предаване на патогени. Този единствен метод предпазва от бременност и инфекциозни заболявания. Ако презервативът се скъсва или счупва по време на употреба, потърсете лекар за съвет. Не използвайте презерватива след изтичане на 72 часа. Моля, съобщете на производителя и Вашия национален компетентен орган всички данни за инцидентите, свързани с използването. Изхвърляйте използваните презервативи внимателно, като не ги изхвърляте в тоалетната. Измийте переносимост и боклук, преди да продължите с ползването.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Внимателно отговорете запечатаната опаковка и не отваряйте, докато не получите разрешение от Вашия лекар. По този начин запечатаната опаковка гарантира, че съдържанието е чисто и не е повлияно от замърсявания. Внимайте: Може да повреди преразпечатаните предмети с остри ръбове, бижута или заострени предмети. Не използвайте опаковката, ако е повредена или отворена или вече отворена опаковка.

2. Хванете резервоара здраво с палец и пръст, за да не се образуват вдухвания. Може да се образуват вдухвания, ако издържите твърде дълго пръстичука и развиете пръстичука. Не използвайте пръстичука, ако е развиеден или развиеден, преди да се стигне до твърди допир между пениса и тялото на партньора. Само тази преразпечатана опаковка може да помогне за предотвратяване на развиеден пръстичук, развиеден и бременност. Ако пръстичукът не може да бъде вкаран, развиеден, посочава на развиеден е грешна. В този случай не обръщайте преразпечатана и не го използвайте отново, тъй като телесните течности могат да попаднат в пръстичука. Използвайте нов преразпечатан и внимателно да посочава на развиеден. Ако забележите, че преразпечатан се излиза или теча, проверете за евентуални повреди, тъй като това може да доведе до повреда на пръстичука.

3 Извадете члена, преди да се отпусне! Дръжте презерватива в основата на пениса, за да предотвратите изплъзването му.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте презервативи заедно с лубриканти, съдържащи масло или лубрикант (например вазелин, бебешки масло, крем, масло за коса и др.), тъй като те могат да развалят геловите. Те увредят презерватива и причиняват бързото му разкъсване. **Ако използвате лубрикант, използвайте само водни лубриканти, като подпошки.** Не използвайте лубрикант на водна основа. Преди да използвате лубриканта, помнете: употребата за употреба върху опашката е по-опасна, от употребата върху penis или вътрешността на презерватива, тъй като това увеличава риска от излизане или скъсване на презерватива. При анализа на риска от излизане или скъсване на презерватива, за да намалите риска от скъсване или излизане на презерватива. При използването на вагинални свещички винаги използвайте презерватив. Не използвайте презерватива на penis и вагинално секс. Използвайте лекарства, отпуснати по лекарско предписание, за да намалите риска от излизане или скъсване на презерватива. Не използвайте презерватива, който е мокър, попитан или смазан с лубрикант, тъй като това намалява неговата ефективност. Използвайте презерватива само съвместимостта на лекарствата с презерватива. Внимание: Истинните бикове не използват презерватива. **ВНИМАНИЕ!** Презервативите са предназначени само за однократна употреба. Многократната употреба намалява тяхната безопасност и може да доведе до излизане или скъсване на презерватива.

ХИВ или полово предавани болести. Използвайте нов презерватив преди всяка промяна на сексуалната практика (вагинален, анален, орален секс).

DŮLEŽITÉ POKYNY Při manipulaci s kondomem je zásadní postupovat opatrně. Růžice se často trvanlivosti uvedených na obalu a na zapечатém obalu – po tomto datu je kondom nepoužitelný. Kondom nikdy neskladujte na chladném, suchém místě a chráňte je před horkem a přímým slunečním zářením. Kondomy nezahazujte do odpadků, nenuťte je do vody a nevyhazujte se může vyvolat nesnášenlivost na formu, alergických reakci až anafylaktické šok. Pokud pociťujete alergickou reakci na latex, při obtížích se obraťte na svého lékaře. Kondom by měl být zvláště s radu lékaře. Každý kondom je jedinečným výrobkem, projevem, při správném použití (viz pokyny k použití) chrání před infekcemi pohlavními a před těhotenstvím. Žádná ochranná pomůcka však nemůže záruku 100% ochranu před těhotenstvím nebo před infekcemi onemocněními přenosnými pohlavně poskytnout. Kondom může být protnut, vyhledávejte co nejrychleji, je nepoužívejte déle než 72 hodin, lékaře. Je důležité zvažovat incidenty související s produktem a jeho vlastnosti a používat kondom podle národních údajů. Použité kondomy patří do odpadkového koše, nikoli do toalety. Před opakovanými milostnými hráči si umyjte ruce.

NÁVOD K POUŽITÍ

[illegible][illegible]

použijte nový kondom.

[illegible]

UPUTÉ ZA UPORABU

1 Zavarenu foliju pažljivo otvorite na označenom mjestu („Open here“). Zavarenu foliju može se pokidati bez oštećenja kondoma. Oprez: Kondom možete oštetiti prilikom metima s oštrim rubovima, nakitom ili dugim noktima. **Nikada nemojte koristiti kondome iz oštećenih ili već otvorenih omotala.**

2 Čvrsto držite spremnik palcem i kažipalcom tako da ne nastane zračni džep. Povucite kožicu unatrag i kondom od spremnika odmotajte preko krutog penisa prije nego što dođe do prvog kontakta između penisa i tijela.

partnera. Samo tako kondom može sprječiti spolno prenosive bolesti i trudnoću. Ako se kondom ne može lako odmotati, radi se o pogrešnom smjeru odmotavanja. **U tom slučaju nemojte preokrenuti kondom i ponovno ga koristiti jer će se inače tjelesne izlučevine prenijeti na partnera.** Koristite novu izlucivku i pazite na smjer odmotavanja. Ako primijetite da kondom klizi ili steže, provjerite ima li oštećenja jer bi to moglo dovesti do pucanja.

3 Izlucite ud prije nego omilaviti Držite kondom za bazu penisa kako biste sprječili da sklizne.

OPREZ! Nemojte koristiti kondome s lubri-
kantima koji sadrže ulja ili masti (npr. vazelin,
dječja ulja, losioni za tijelo, ulja za masažu
kuhinske masti). Oni djeluju nagrizajuće
uzrokuju brzo kidanje kondoma. **Ako kori-**

stite lubrikante, oni moraju biti označeni kao prikladni za uporabu s kondomima. Nemojte koristiti lubrikante koji nisu namijenjeni za uporabu na pakiranjima. Nemojte nanositi lubrikant izravno na penis ili unutaršnji zid pucanja jer to povećava rizik od sklizanja i pucanja kondoma. Za analnu uporabu uvijek koristite lubrikant koji je posebno namijenjen za smanjenje rizika od pucanja ili sklizanja kondoma. Pri uporabi vagineta obratite pozornost na odgovarajuće upute za uporabu. Ako se za analnu uporabu koristi kondom, uvijek se pridržavajte recept ili upute za uporabu (mast koji sadrži gelski lubrikant, kao što je "Mast Gel" i "Gel" itd.), pitajte svog liječnika ili ljekarnika o njihovoj kompatibilnosti s kondomima. Prezirni nitovi mogu biti oštećeni kondomom. **Kondom od kože.** Kondom od kože može biti oštećen upotrebom vaginalne i analne uporabe. Višekratna uporaba smanjuje njihovu sigurnost i može dovesti do neželjenih trudnoća i infekcije HIV-om ili spolno prenosivih bolesti. Koristite novu kondom za svaku seksualnu aktivnost (oralnu, vaginalnu, analnu, oralnu).

WAŻNE WSKAZÓWKI Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z przetworzonymi. Należy przestrzegać daty ważności podanej na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym – po jej upływie nie używać przetworstw! **Przetworzyły przechowywać w chłodnym, suchym miejscu zabezpieczonym przed ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.** Przetworzyły nie ingerować w oznaczenia. Nie poddawajmy ich zbyt wysokim

