

einhorn EXTRA BLATT

WAS GEHT'S HIER??

Noch nie ein Kondom
mit Extrablatt gesehen?
Wir auch nicht. Aber es
gibt ja immer ein
erstes Mal.
Also runter mit
den Klamotten,
äh, her mit der
Lesebrille, rein
ins Getümmel.



Hol dir deinen Fair-Latex-Fetisch!

einhorns neuer Porno?

Wie? Du hast noch keinen
Fair-Latex-Fetisch? Dann
bist du wohl neu im einhorn
Game. Macht nix! Für dich
ist dieser Porno mit Bildungs-
mehrwert oder Bildungsfilm
mit Pornomehrwert ...



einhorn.my/0190696969


Juhu, hier wirds laaaaaangweilig!!

Man sagt, Gespräche über Verantwortungseigentum senken die Lust auf Sex um bis zu 100 %. Das ist gut! Wenn man nämlich mal eine Verschonpause im busy Bums-Life braucht. Also, los gehts:

Verantwortungseigentum – was ist das?
Bei Unternehmen in Verantwortungseigentum (z.B. einhorn) steht nicht, wie normalerweise im Kapitalismus so üblich, die Gewinnmaximierung an erster Stelle, sondern ein höherer Zweck, von dem eine breite Masse profitieren kann. einhorns Zweck sind faire, nachhaltige Produkte mit Extra-Spaß, Aufklärung und Transparenz, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher

Wandel. Durch die Rechtsform bleiben Gewinne im Unternehmen und sind Mittel zum Zweck. Außerdem liegt ein Teil von einhorns Stimmrechten bei einer unabhängigen Stiftung, die ein Veto einlegt, sollten Entscheidungen gegen die Grundsätze des Verantwortungseigentums verstoßen. Dadurch ist z.B. ein (gewinnbringender) Verkauf unmöglich. War die Pause zu kurz? Dann: www.purpose-economy.org

Spickzettel

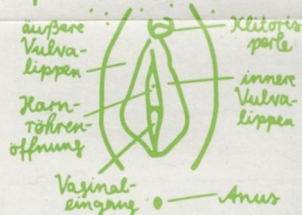

Das sagen unsere Kund*innen:

„Das beste Kondom, das mein Glied je berühren durfte.“
P. Enis

„Näher an gefühltecht kam bisher kein anderes.“
K. Litoris

WUH!

„EHREN- URKUNDE“



Du, _____,
willst es fair und nachhaltig
und jedes einhorn will mit dir
ins Bett. In Anerkennung deiner
herausragenden Leistungen und
deines 1A-Kondomgeschmacks
ernennen wir dich zum

einhorn Ehrenmitglied!

WOW!

Reinhorny

Der einhorn Ehrenrat



4 ever
and ever!

Ohne Nachhaltigkeits-
mission kein einhorn!
Wir schauen ständig,
wie's noch besser geht.

SCHNAPPE
SCHNAPPE

LIEBLINGS- PASSFORM



Für viel Gefühl
und Freiraum
um die Eichel

Passt den
meisten!

Größer!

ANLIEGENDE PASSFORM




Extradünn, für
intensives Fühlen

53
mm
Nominale Breite

Passt den
meisten!

Spickzettel

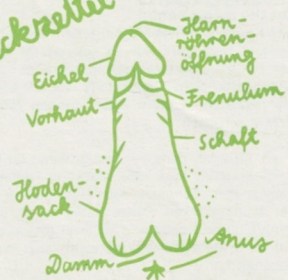

Wer das liest, liked!
Du weißt, was das heißt:
ab mit dir ins Internet!

Tippi! Kommt am
besten, wenn es sich reimt.

Liebe/-r

du bewegst dich wie

Dein Blick, so

wie

Fühl mich

denn du bist mein

Ich

Dein/-e

dich.

mit dir,



REINGE- SCHAUT!

Jetzt musst du einen
Jahresvorrat kaufen.

Aber wir wollen
mal nicht so sein
und geben dir
einmal 15 % Rabatt
mit dem Code:

reingeschautes9
www.einhorn.my/jahresvorrat




1 Deutsch

Let the magic begin!

Das Kondom solltet ihr bei jedem sexuellen Kontakt benutzen. Nur so schützt ihr euch vor sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollter Schwangerschaft und ihr könnt die nächsten Minuten oder Stunden (boah) richtig genießen.

1 Bitte sei ganz vorsichtig, wenn du das Kondom aus der Packung nimmst. Fingernägel, Schmuck oder Igel haben an der empfindlichen Hülle nichts zu suchen, denn Einhorn Kondome sind zwar robust und auf hohe Belastbarkeit getestet, aber nicht unzerstörbar.

2 Ziehe die Vorhaut des erigierten Penis zurück und lege das Kondom richtig herum auf den Penis Kopf.

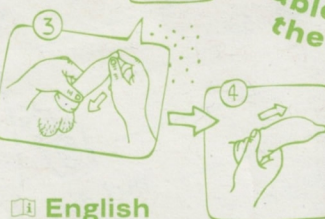

1 English

Let the magic begin!

The condom should be put on before any sexual contact. That's the only way to protect yourself from sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy. And, you know, properly enjoy the next few minutes or hours (whoa yeahh!).

1 Please be very careful when removing the condom from the packaging. Fingernails, jewelry, or hedgehogs don't belong anywhere near this sensitive sheath. Condoms are robust and resilient, but not indestructible.

2 Pull the foreskin back on the erect penis and place the condom right side up on the tip.

3 Pinch the reservoir with your thumb and index finger to keep air out and roll it all the way down without tugging. Did you put it on inside out? Grab another one - there's already bodily fluid on the outside.

4 Ooh... done? Pull the still-erect penis out while holding the condom in place to avoid any leakage of sperm.

3 Drücke mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand die eingeschlossene Luft aus dem Reservoir und rolle es nun mit der anderen Hand bis zum Schaft ab. Lag das Kondom doch falsch herum auf oder ist abgerutscht? Nimm bitte ein Neues, denn das vorige ist schon mit Körperflüssigkeit in Berührung gekommen.

4 Uuuuh... Fertig? Ziehe den noch erigierten Penis heraus und halte dabei, um ein Auslaufen des Spermas zu vermeiden, das Kondom an der Basis gut fest.

5 Knote das Kondom zusammen und wirf es in den Restmüll, bitte nicht ins Klo. PS: Die kleine Einzelverpackung kommt in die gelbe Tonne.

Magic interrupted

Überprüfe zwischendrin mal den Sitz des Kondoms. Wenn es unangenehm zieht, es überdehnt ist oder abquecht, nimm ein neues Kondom und mach erst dann weiter.

Nochmaail!

2 Die zweite, dritte, vierte Runde steht an? Nur zu, aber mit neuem Kondom! Bitte benutzt jedes Kondom nur ein Mal.

Schön feucht:

Einhorn Kondome sind mit Silikon-Gleitmittel beschichtet, aber die Vagina sollte trotzdem schön feucht sein; sonst kann das Eindringen schmerzhaft werden und auch dem Kondom tut die Rubbelei nicht gut. Gleitmittel macht Spaß - probiert es aus! Benutzt bitte ein für Latex-Kondome geeignetes Gleitgel. Ölasierte Substanzen wie Butter (uhl),



Kokosöl, Vaseline, Massageöl oder Bodylotion lassen das Kondom porös werden. Wir empfehlen (Silikon-)Gleitgel auf Wasserbasis.

Lust auf Analsex?

Gern! Da einhorn Kondome eine dünne Wandstärke haben (das macht sie echt gefühlsecht) und der Anus über keine natürliche Lubrikation verfügt, ist es extra wichtig, dass genügend Gleitgel im Spiel ist. Ansonsten könnte das Kondom reißen. Achtet während eurer Liebessession auch darauf, niemals mit demselben Kondom vom Anus in die Vagina überzugehen, da die Darmbakterien in der Vagina Entzündungen auslösen können. Legt euch also mehrere Kondome zurecht.

Oh no!

Ist es doch mal abgerutscht, eingerissen oder „geplatzt“? Da hilft nur eins: Sucht so schnell wie möglich eine/n Arztin/Arzt auf. Wartet nicht länger als 72 Stunden. Warum? Hier erfahrt ihr mehr: www.einhorn.my/OhNo

Übrigens:

Latexkondome sind aus Naturkautschuk und können durch den direkten Kontakt mit Arzneimitteln wie Salben beschädigt werden. Holt euch dazu einen Ärztlichen Rat, oder fragt in der Apotheke. Einige Menschen reagieren allergisch, z. B. mit Hautreizungen, auf Latex. Höchst selten kann das zu einem anaphylaktischen Schock führen. Benutzt im Falle einer Unverträglichkeit latexfreie Kondome.

Einhorn Kondome bieten einen wirksamen Schutz vor Schwangerschaft, Geschlechtskrankheiten und der Infektion mit HI-Viren, aber wie bei allen Verhütungsmitteln kann ein 100%-iger Schutz nicht garantiert werden.

The intestinal bacteria can lead to inflammation inside the vagina, so you better have several condoms with you.

Oh no!

Did the condom slip off, rip or burst? There's only one thing to do: visit the doctor as soon as possible within 72 hours. Find more on: www.einhorn.my/OhNo

BTW

Latex condoms are made from natural rubber and can be damaged by direct contact with medicinal products like ointments. Ask your pharmacist or doctor before using them. Some people are allergic to latex, which can cause skin irritation. Even if this is rare, it can cause anaphylaxis. Use latex-free condoms if you are allergic.

Einhorn condoms offer effective protection against pregnancy and sexually transmitted infections or viruses. But just like all other contraception methods, 100% safety can't be guaranteed.

Just like the mythical unicorn they are named after, einhorn condoms are notoriously sensitive creatures. Protect them from extreme heat and sunlight, as well as moisture.

Safe and sound?

Does the individual container look damaged or

Einhorn sind ja bekanntermaßen empfindliche Wesen, so auch die einhorn Kondome. Schütze sie vor übermäßiger Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Nässe und Feuchtigkeit.

Altes Zeug, weg damit!

Ist die Siegelrolle des Kondoms kaputt, das Kondom selbst klebrig, spröde oder sichtbar beschädigt, oder ist das Haltbarkeitsdatum überschritten: nimm bitte ein neues Kondom aus einer unversehrten, neuen Packung. Prüfe immer das Haltbarkeitsdatum, bevor du es benutzt.

Sexuell übertragbare Krankheiten

Wer noch nie eine hatte (Glückwunsch) oder das zumindest glaubt, weiß häufig gar nicht, welche Krankheiten sexuell übertragbar sind. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, z. B. über Chlamydien, die tückischen kleinen Bakterien. Also, schaut es euch mal an: www.einhorn.my/liebernich

einhorny Latex

Der macht uns richtig stolz und bringt uns in Wallung! Denn der Latex in unseren Kondomen wird zu 100% von Kautschukbäumen gewonnen, die in biodiversen Agroforstsystemen angebaut werden. Zusammen mit unseren Partner*innen entlang der Lieferkette haben wir die „Regenerative Rubber Initiative“ ins Leben gerufen. Wir wollen Kollaboration statt Wettbewerb und teilen unseren Latex mit anderen Marken - denn „Sharing is caring“.

www.einhorn.my/geileskondom

Is the expiration date a bit ancient? Even if the rubber material is sticky, brittle, torn or obviously damaged, do not use it and take another condom from a new pack. Always check the expiration date.


Sexually transmitted infections

Those who haven't had one (congrats) or believe they haven't, often don't know what kind of infections there are. It's definitely worth knowing a bit more about it. www.einhorn.my/liebernich

einhorny latex

The latex used for our condoms is 100% sourced from rubber trees that are planted in biodiverse agroforestry systems. Joining forces with our partners in the value chain, we created the „Regenerative Rubber Initiative“.

We aim for collaboration not competition, and share our latex with other brands - because sharing is caring. www.einhorn.my/geileskondom

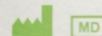

Richter Rubber Technology
Sdn. Bhd. 09300, Kuala Ketil
Kedah, Malaysia
www.myrtr.de

Designed & distributed in Berlin
by einhorn products GmbH
horny@einhorn.my



rrt Vertrieb und
Service GmbH

CE
1639
ISO 4074:2015

231201 REV0