

- Si usted ovezde problemas de irritación, arétez el uso de preservativos en latex e demande consells auprés de votre médecin traitant.
- Appelez une assistance médicale dans les 72 heures si un préservatif fuit ou écale pendant l'utilisation.
- Si le film individuel est visiblement endommagé, jetez le préservatif.
- Entreposez dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi:

ETAPE 1: Vérifiez la date d'expiration avant utilisation. Déchirez le sachet avec précaution sans utiliser les ongles, les dents ou tout ce qui est susceptible d'endommager le préservatif. Assurez-vous de ne pas le déchirer et manipulez-le soigneusement.

ETAPE 2: Mettez le préservatif dès que le pénis est en érection avant tout contact entre votre pénis et votre partenaire. Ne le mettez pas au dernier moment car cela évite la transmission de maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles ainsi que des risques de grossesse. L'air à l'intérieur du préservatif peut causer sa déchirure. Afin d'éviter cela, pincez délicatement le petit réservoir entre deux doigts pour en chasser l'air. Assurez-vous que le rouleau est à l'extérieur et placez le préservatif sur le pénis en érection. Tout en serrant la pointe, utilisez votre autre main pour dérouler doucement le préservatif en pressant doucement l'air vers la base du pénis.

ETAPE 3: Arrêtez et vérifiez si le préservatif glisse ou se serre excessivement sur le pénis car cela peut entraîner une rupture.

ETAPE 4: Immédiatement après l'éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, tenez le préservatif fermement en place à la base du pénis quand vous le retirez, de sorte que le préservatif ne glisse pas.

ETAPE 5: Enveloppez le préservatif utilisé dans un tissu et jetez-le dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

Attention: ce préservatif est fait de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si l'utilisateur est allergique au latex.

ES

Los condones Day&Night están hechos de látex natural de alta calidad, cuentan con: superficie lisa, color natural, son lubricados con lubricante no medico y vienen en empaques totalmente sellados.

Usándolos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los condones son anticonceptivos. Sin embargo, ningún método de anticonceptivo puede proporcionar protección al 100%.

Si se usan adecuadamente, los condones de látex ayudarán a reducir el riesgo de transmisión del VIH (SIDA) y muchas otras enfermedades de transmisión sexual, incluyendo; clamidia, herpes genital, verrugas genitales,

gonorrea, hepatitis B y sífilis.
Ancho nominal: 56mm.

Precauciones y advertencias

- El condón es para un solo uso.
- No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite de masaje, aceite de bebé, loción de cuerpo, mantequilla, etc. ya que pueden dañar el preservativo, también lo pueden hacer algunos medicamentos que se aplican al pene o la vagina. Consulte a su médico o farmacéutico si es seguro usar estos medicamentos con condones.
- Si experimenta irritaciones, suspenda el uso de los condones de látex y obtenga asesoría de su médico.
- Busque asistencia médica, por lo menos dentro de las próximas 72 h, si un condón se derrama o estalla durante el uso.
- Si la empaque individual está seriamente dañado, deseché el condón.
- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos del calor y de la luz directa del sol.

Instrucciones de uso

PASO 1: Compruebe la fecha de caducidad antes del uso. Rasgue a lo largo de un lado del empaque, asegúrese de no rasgar el condón. Cuidadosamente maneje el condón, ya que puede ser dañado por uñas, joyas, etc.

PASO 2: Ponga el condón después de que el pene esté completamente erecto, antes de que haya algún contacto entre el pene y el cuerpo de su pareja. Esto ayuda a prevenir el embarazo y la transmisión de las ITS. El aire atrapado dentro del condón podría causar que este se rompa. Para evitar esto, apriete la punta del condón. Asegúrese de que el anillo (base) está en el exterior y coloque el condón sobre el pene erecto. Mientras sigue apretando la punta, use la otra mano para desenrollar el condón presionando suavemente hacia fuera, con dirección a la base del pene.

PASO 3: Deléngase y compruebe si el condón se desliza o se ajusta adecuadamente sobre el pene ya que esto puede conducir a una ruptura.

PASO 4: Poco después de la eyaculación, mientras el pene está todavía erguido, mantenga el condón firmemente en la base del pene a medida que se retrae, de modo que el condón no se deslice.

PASO 5: Envuelva el condón usado en un pañuelo o papel higiénico y deposítelo en un contenedor de basura. No lo vacíe en el inodoro.

Precaución: Este condón está hecho de caucho de látex natural que puede causar reacciones alérgicas incluyendo choque anafiláctico. Si el usuario es alérgico al látex.

Standard EN ISO 4074:2015

100% Electronically tested


Nominal width: 56mm

Last updated Date 08th July 2022 | 0464

Master reference information: H-FU-01 (v.3)

Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller		UDI		Distributor / Distributor / Distributor / Distributor	
Authorized representative in the European Community / Mandatado de la Comunidad Europea / Gereguleerder in de Europese Gemeenschap / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Bevoegdvertegenwoordiger in der Europäischen Gemeinschaft		Unique Device Identifier / Identificador único de dispositivo / Unieke apparatuur-identificatie / Identificatore univoca del dispositivo / Eindeutige Produktkennzeichnung		Importer / Importateur / Importeur / Importador / Importör	
[Logo]		[Logo]		[Logo]	

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

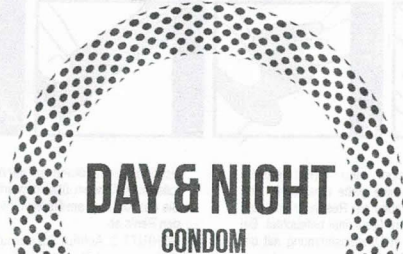

100 CONDOMS

Day & Night condoms are made of high quality natural rubber latex, smooth surface, parallel sided, natural color, reservoir ended and lubricated with non-medicated lubricant.
Nominal width: 56mm.

Store in a cool, dry place away from heat and direct sunlight.

EC REP

Advena Ltd

Tower Business Centre,
2nd Floor, Tower Street,
Swatara, BKR 4013, Malta

LOT PN533102
2024-04
2029-03


Imported and distributed by:

ASHA International
Seinhuiswachter 1-3, 3034 KH
Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 10 467 67 47

Manufactured by: Innolates Sdn. Bhd.
Lot 591 & 594, Persiaran Raja Lumu,
Pandamaran Industrial Estate, 42000
Port Klang, Selangor, Malaysia.

Keep dry / Garder au sec / Droog houden / Bewaren / Maitiner seco / Trocken aufbewahren	Do not use if package is damaged / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is / No use if the package is damaged / Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist	Expiry Date / Date d'expiration / Verfallsdatum / Fecha de caducidad / Ablaufdatum
Keep away from sunlight / Tenir à l'écart de la lumière du soleil / Of van licht en zonlicht houden / Montreigne away from the sun / Von Sonnensicht fernhalten	Consult instructions for use / Consultez le mode d'emploi / Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voor gebruik / Consultar instrucciones de uso / Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung	Medical Device / Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / Dispositivo medico / Medico / Medico / Medico
Do not reuse / Ne pas réutiliser / Niet hergebruiken / No re-use / Nicht wiederverwenden	Lot Number / Numéro de lot / Lotnummer / Número de lote / Lotnummer	Caution / Precaution / Let op / Precaución / Voorzicht
Contains natural rubber latex / Contient du latex de caoutchouc naturel / Bevat natuurlijk rubber / Contains latex of caoutchouc naturel / Enthält Naturkautschuklatex	Date of Manufacture / Date de fabrication / Fabricatiedatum / Fecha de fabricación / Herstellungsverdatum	Dispose used condom into waste bin / Jeter le condom usagé dans la poubelle / Goet gebruikte condom in de afvalbin / Descartar el condom usado en el contenedor de basura / Gebrauchte Kondome in die Mülltonne entsorgen



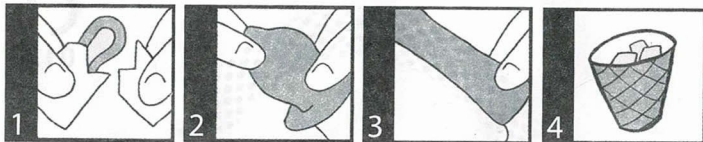

DE

Day&Night Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex, haben eine glatte Oberfläche, und eine natürliche Farbe. Sie haben ein Reservoir und sind mit einem nicht-medizinischem Gleitmittel befeuchtet. Bei sachgerechter Verwendung in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers sind Kondome eine wirksame Form zur Empfängnisverhütung. Allerdings können Kondome keinen 100% igen Schutz vor Schwangerschaft bieten. Bei richtiger Anwendung, können Latexkondome helfen, das Risiko der Übertragung von HIV-Infektionen (AIDS) zu reduzieren, sowie viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich Chlamydien-Infektion, Genital-Herpes, Genitalen Warzen, Gonorrhoe, Hepatitis B und Syphilis. Normale Weite: 56mm.

Zur Beachtung:

- Das Kondom ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline, Massageöl, Babyöl, Körperlotion, Butter, etc. diese können das Kondom beschädigen. So können auch einige Medikamente, die auf Penis oder Vagina angewendet werden das Kondom beschädigen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie diese Medikamente mit Kondomen zu verwenden.
- Wenn bei Ihnen Irritationen auftreten, beenden Sie die Verwendung der Latexkondome und fragen Sie Ihren Arzt.
- Bitte suchen Sie ärztlichen Rat, mindestens innerhalb von 72 Stunden, sollte ein Kondom beschädigt sein oder während des Gebrauchs reissen.
- Sollte die Folie beschädigt sein, entsorgen Sie bitte das Kondom.
- Kondome kühl und trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebrauchsanweisung:

SCHRITT 1: Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Benutzung, öffne Sie auf der Seite die Folie. Das Kondom vorsichtig aus der Folie nehmen und achten Sie darauf, es nicht durch Fingernägel, Schmuck etc. zu beschädigen. **SCHRITT 2:** Setzen Sie das Kondom auf den Penis auf auf, nachdem dieser vollständig erigiert ist, und achten Sie auf die Abrollrichtung damit das Kondom eng anliegt und sich keine Luft im Reservoir befindet, eine sachgerechte Benutzung hilft Ihnen und Ihrem Partner Schwangerschaft und Übertragung von STI zu verhindern. Ein Kondom, könnte beim unsachgemäßen anlegen beschädigt werden, um dies zu vermeiden stellen Sie

sicher das der Rollrand auf der Außenseite plaziert ist und rollen das Kondom über den erigierten Penis ab. Halten Sie das Kondom am Reservoir fest und rollen Sie es über den Penis ab.

SCHRITT 3: Achten Sie darauf das das Kondom nicht abrischt und überprüfen, Sie den richtigen Sitz.

SCHRITT 4: Nach der Ejakulation halten Sie das Kondom fest und ziehen Sie den Penis aus der Vagina während der Penis noch erigiert ist.

SCHRITT 5: Das benutzte Kondom bitte im Müll und nicht in der Toilette entsorgen.

⚠ Achtung: Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.

NL

Day&Night condoms zijn gemaakt van hoge kwaliteit natuurlijk rubber latex, glad oppervlak, natuurlijke kleur, inclusief reservoir en voorzien van een niet-medicaal glijmiddel. Indien de instructies van de fabrikant worden nageleefd zijn de condoms een effectieve contraceptie methode. Echter biedt geen een contraceptiemethode 100% bescherming. Mits goed gebruikt helpen condoms het risico te verminderen op overdracht van een HIV infectie (aids) en vele andere seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder chlamydia, herpes, genitale wraatten, gonorrée, hepatitis B en syfilis. Nominale breedte: 56mm.

Voorzorg en waarschuwingen:

- Gebruik een condom slechts 1 keer.
- Gebruik geen glijmiddelen op oliebasis, zoals Vaseline, massageolie, babyolie, body lotions, boter, etc. welke de condoms kunnen beschadigen. Ook sommige medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht kunnen condoms aantasten. Vraag uw apotheker of huisarts om advies.
- In geval van irritatie, stop dan het gebruik van het latex condom en vraag advies bij je huisarts.
- Zoek medische hulp, tenminste binnen 72 uur, wanneer het condom scheurt of lekt tijdens gebruik.
- Als de folie is beschadigd, gooi de condom weg.
- Bewaar op een koele, droge plaats, buiten invloed van direct zonlicht.

Gebraiksaanwijzing:

STAP 1: Controleer voor gebruik de uiterste

gebruiksdatum. Scheur de verpakking aan één zijde open en haal het condom er voorzichtig uit. Condoms kunnen beschadigen door nagels en sieraden.

STAP 2: Breng het condom pas aan wanneer de penis volledig stijf is. Vermijd elk contact tussen de penis en het lichaam van uw partner voordat het condom is aangebracht om zwangerschap en overdracht van SOA's te voorkomen. Lucht in een aangebracht condom, kan een breuk veroorzaken. Vermijd dit door het topje van het condom dicht te knijpen. Controleer of het af te rollen gedeelte aan de buitenkant zit en plaats het condom op de top van de stijve penis. Blijf het topje vasthouden, gebruik je andere hand om het condom over de gehele lengte af te rollen. Als het condom goed is aangebracht zal het reservoir geen lucht bevatten.

STAP 3: Stop en controleer als het condom afglijdt of als het condom te strak om de penis zit, want dit kan tot breuk leiden van het condom.

STAP 4: Houd het condom na de zaadlozing aan de rand vast en trek de penis terug nog voordat deze verslapt. Dit helpt afglijden te voorkomen.

STAP 5: Rol na het gebruik het condom in een stukje tissue en gooi het in de vuilnisbak. Spoel niet door het toilet.

⚠ Waarschuwing: Dit condom is gemaakt van een rubber latex welke allergische reacties kan veroorzaken inclusief anafylactische shock. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker allergisch is voor latex.

EN

Day&Night condoms are made of high quality natural rubber latex, smooth surface, parallel sided, natural colour, reservoir ended and lubricated with non-medicated lubricant. When used in accordance with manufacturer's instruction, condoms are an effective form of contraception. However, no method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV and Sexually Transmitted Infections (STIs). If you suspect that you or your partner may have become pregnant or infected, consult your doctor immediately. If used properly, latex condoms will help to reduce the risk of transmission of HIV infection (AIDS) and many other Sexually Transmitted Infections (STIs), including chlamydia, genital herpes, genital warts, gonorrhoea, hepatitis B and syphilis. Nominal width: 56mm.

Precaution and Warnings

- The condom is for single use only. If reused there might be an increased risk of failure or infection.
- Use only water-based lubricants with condoms. Do not use oil-based lubricants, such as petroleum jelly, massage oil, baby oil, baby lotion, butter, etc. which can damage condoms. So can some topical medicines that are applied to penis or vagina. Consult your doctor or pharmacist if it is safe to use medicines with condoms.
- If experience irritations, discontinue use of the latex condoms and get advice from your doctor.
- Seek medical assistance, at least within 72 hours, should a condom leak or burst during use.

• If the latex material is sticky, brittle or the individual package is obviously damaged, do not use condom and use a new one from an undamaged package.

• Store in a cool, dry place away from heat and direct sunlight.

Instruction for Use

STEP 1: Check the expiry date before usage. Tear along one side of the foil, be sure not to rip the condom. Carefully handle the condom as it can be damaged by fingernails, jewellery etc.

STEP 2: Put the condom on after the penis is fully erect, before there is any contact between the penis and your partners body. This helps to prevent pregnancy and transmission of STIs. Air trapped inside a condom, could cause it to break. To avoid this, squeeze the tip of the condom. Be sure that the roll is on the outside and place the condom over the erect penis. While still squeezing the tip, use your other hand to unroll the condom gently pressing air out towards the base of the penis.

STEP 3: Stop and check if the condom is slipping off or tighten excessively onto the penis, because this may lead to breakage.

STEP 4: Soon after ejaculation, while the penis is still erect, hold the condom firmly in place at the base of the penis as you withdraw, so that the condom does not slip.

STEP 5: Wrap the used condom in a tissue and dispose into a waste bin. Do not flush it down the toilet.

⚠ Caution: This condom is made with natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock if user is allergic to latex. If you are allergic to natural rubber latex products, consult your doctor for advice before use.

FR

Les préservatifs Day&Night sont faits de latex caoutchouc naturel de haute qualité, d'une surface lisse, de couleurs naturelles, d'un réservoir terminé avec du lubrifiant non médicamenteux. Lorsqu'ils sont conformément utilisés aux instructions du fabricant, les préservatifs sont utilisés comme une forme de contraception. Cependant, aucune méthode de contraception ne peut assurer une protection à 100%. S'ils sont utilisés correctement, alors les préservatifs aideront à réduire le risque de transmission du VIH (SIDA) ainsi que de nombreuses maladies sexuellement transmissibles y compris l'infection aux chlamydia, l'hépatite génitale, les verrues, la gonorrhée, l'hépatite B et la syphilis. Largeur nominale: 56mm.

Précautions et mises en garde:

- Le préservatif est à usage unique.
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile, tels que de la vaseline, de l'huile pour massage, de l'huile pour bébé, solution pour le corps, beurre, etc. qui peuvent endommager le préservatif. Ne pas utiliser certains des médicaments pour le pénis ou pour le vagin sans avis médical.